

Einfache Anwendung

CowMotion lässt sich schnell und unkompliziert an die Rinderklaue anbringen und anpassen. Die Zeit im Klauenstand verkürzt sich und verringert den Stressfaktor beim Tier. Für den Landwirt, Tierarzt und Klauenpfleger bedeutet das mehr Effizienz und entspannteres Arbeiten.

CowMotion sollte allerdings immer erst nach einer regulären Klauenpflege eingesetzt werden. Die Klaue muss trocken sein (dazu einen Heißluftfön nutzen).

Hinweis!

Grundsätzlich können unsere Rinderorthesen mit bekannten Klauenklebstoffen verklebt werden. Wir empfehlen einen Klebstoff mit einer offenen Zeit von 60 Sekunden, damit Ihr ausreichend Zeit habt die Orthese anzubringen und an der Kappe zu versiegeln.

Simple application

CowMotion can be quickly and easily attached to the bovine claw and adjusted. The time in the hoof stand is shortened and reduces the stress factor for the animal. For the farmer, veterinarian and hoof trimmer, this means more efficiency and more relaxed work.

However, it should only be used after regular hoof trimming. The claw must be dry (use a heat gun for this).

Notice!

In principle, our cattle orthoses can be glued with known hoof adhesives. We recommend an adhesive with an open time of 60 seconds so that you have enough time to apply the orthosis and seal it to the cap.

CowMotion

Innovativer Aufbau

CowMotion ist aus zwei unterschiedlichen Schichten aufgebaut. Diese sorgen für eine optimale Übertragung auf die krafttragenden Teile der Klaue und schützen die anatomisch sensiblen Bereiche. Durch das flexible Material lässt sich die Orthese schnell und exakt an jede Rinderklaue anpassen.

Innovative construction

CowMotion is made up of two different layers. These ensure optimal transmission to the load-bearing parts of the claw and protect the anatomically sensitive areas. Thanks to the flexible material, the orthosis can be quickly and precisely adapted to any cattle claw.



Tec2Fit GmbH . Holzweg 32 . D-39128 Magdeburg . Germany
+49 391 66279313 . info@cowmotion.de

A BRAND BY
TEC2FIT

CowMotion

Die tiergerechte und nachhaltige Lösung für Klauenerkrankungen
The animal-friendly and sustainable solution for claw diseases



Die revolutionäre Rinderorthese

CowMotion ist die revolutionäre Orthese zur Behandlung von Klauenerkrankungen und Lahmheiten bei Rindern. Sie ist in enger Zusammenarbeit mit Veterinärmedizinern und Klauenspezialisten entstanden. CowMotion ist die innovative Therapiemöglichkeit und bietet bei konsequentem Einsatz entscheidende Vorteile für das Tier und den Halter.


Minimiert das Risiko für Folgeerkrankungen
Lindert Schmerzen und heilt nachhaltig
Sorgt für längere Lebenszyklen und weniger Abgänge
Verringert die Behandlungskosten

The revolutionary bovine orthosis

CowMotion is the revolutionary orthosis for the treatment of claw diseases and lameness in cattle. It has been developed in close cooperation with veterinarians and claw specialists. CowMotion is the innovative therapy option and, if used consistently, offers decisive advantages for the animal and the owner.

Minimizes the risk of secondary diseases
Relieves pain and ensures sustainable cure
Ensures longer life cycles and fewer departures
Reduces treatment costs

Druckverteilung / Distribution of pressure
CowMotion vs. Holzklötz/Claw block

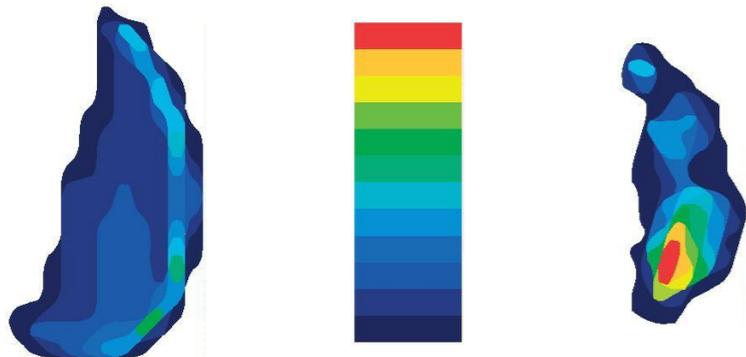

Anleitung

1. Klauenpflege durchführen
2. Orthese auf die Klaue aufziehen. Klaue sollte möglichst bündig anschließen (die Klauenspitze kann man in der Kappenspitze ertasten). Orthese anrauen.
3. Die Orthese mit der Spitze nach unten zeigend in der Hand halten (Kappe zeigt zur Person)
4. Den Kleber nur in die gesamte Kappe auftragen (aufsteigend von Kappenspitze bis Kappenende)
5. CowMotion sofort auf die Klaue anbringen und 10 Sekunden andrücken (regulär ist die Orthese nach ca. 5 Minuten komplett belastbar. Bitte die Hinweise des verwendeten Klebstoffes beachten!)

Instruction

1. Perform claw trimming.
2. Put the orthosis on the claw. The claw should connect as flush as possible (the tip of the claw can be felt in the tip of the cap). orthosis roughen.
3. Hold the orthosis in your hand with the tip pointing down (cap points to the person)
4. Apply the glue to the entire cap only (ascending from cap tip to cap end)
6. Attach CowMotion to the claw immediately and press for 10 seconds (regularly, the orthosis can be fully loaded after approx. 5 minutes. Please observe the instructions for the adhesive used!)

